

Anvisning för professionella

Egentliga Finlands Vårhårdsområde

Åbo Universitets-centralsjukhus

Etikettering av provrör och provkårl


Allmänna instruktioner

- Fåst alltid etiketterna på provrörren och -kårlen (ej etiketter ovanpå påsen). Om det inte finns en undersökningsetikett försedd med streckkod kan man fåsta en handskriven etikett på provrörret eller -kårllet. På etiketten bör framgå patientens namn, personbeteckning samt klockslag, datum och plats för provtagningen.
- Stråva till att ta ett eget provrör för varje prov eller provkombination.
- Använd väl utskrivna undersökningsetiketter med streckkod (streckkodslåsarna låser inte streckkoder av dålig kvalitet). Hela streckkoden bör vara synlig på rörret. Mellan en etikett med streckkod och rörrets kork bör lämna 5 mm utrymme.
- Fåst undersökningsetiketten stående så att ett fönster till provet förblir synligt. Etiketternas hörn får inte sitta löst eller vara vikta. Provrörrens eller -kårlens etiketter bör förbli synliga.
- Fåst alltid anvisningsetiketten om den har instruktioner angående provhantering eller transport av prov eller information om provets kvalitet eller provtagningsställe. Kontrollera att anvisningsetiketten och undersökningsetiketten har samma prov-ID.
- Anvisningsetiketten används inte för följande undersökningar:
 - TYKSHEPA
 - B-PVK+T, B-Neut, B-Diffi, HEMA I
 - E-ABORh, B-XKoe
 - B-BaktVi
- Isoleringsspatienters prov eller nedsmutsade rör bör torkas rena före etikettering.
- Om du hämtar in prov till laboratoriet ska avvikelser i provtagningen och annat att notera skrivas upp på blanketten 'Laboratorioon tuotavat näytteet'.

Personen som fåster etiketter på provrörret eller -kårllet bår ansvaret för provets etikettering och märkning enligt instruktionerna, så att provets mottagare kan beakta avvikelser.

Undantagsfall och separata instruktioner

- Ett provrör eller -kårl med två undersökningsetiketter
 - Fåst den nedersta undersökningsetiketten stående och etiketten för undersökningen som ska beaktas i första hand diagonalt överst.

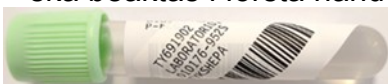


- Ett provrör eller -kårl har fler än två undersökningsetiketter
 - Fåst en patientidentifikationsetikett på provrörret eller -kårllet och förslut provrörret/-kårllet samt alla undersökningsetiketter i en påse. Fåst inte undersökningsetiketter på provrörret/-kårllet.

- Om det skrivs ut flera undersökningsetiketter med samma providentifikation, fäst en undersökningsetikett på provröret/-kärlet och förslut provröret/-kärlet och resterande etiketter i en påse.

Koagulationsundersökningar

- Fäst etiketten stående så att markörlinjen för fyllnadnivå samt fönster till provet förblir synliga.

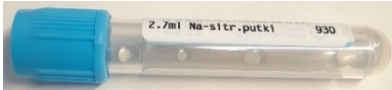

TYKSHEPA

- Ofullständigt fyllda rör, med en provmängd på mindre än 1cm, fäst undersökningsetiketten diagonalt.



- Microrör, vik undersökningsetikettens hörn och placera etiketten liggande



Benmärgspunktionsprov

- När patienten har begäran om benmärgspunktion tillsätts anteckningen STP på undersökningsetiketten.




E-ABORh, B-XKoe

- Näytteentottaja/tunnistaja -etiketten behövs inte om proven kvitteras som tagna i laborieriedatasystemet.
- Om du bara tar ett rör för B-XKoe, fäst en etikett stående och den andra liggande under.




- Ta ABORh och XKoe-proven vid två från varandra oberoende provtagningstillfällen om inte det är frågan om ett nödfall. Nödfall utses av läkare. Om du tar båda proven på samma gång ska denna information antecknas tydligt på en skild etikett.

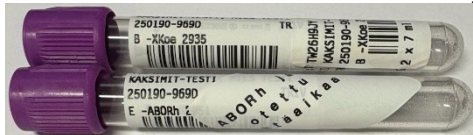

U-KemSeul, 1 undersökningsetikett

- Beige rör utan tillsatsämnen.
 - Fäst en U-KemSeul undersökningsetikett stående.

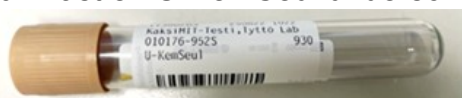


U-BaktVi / U-Solut / U-BAKT+SOL, 2 undersökningsetiketter

- Olivgrönt rör med konserveringsmedel
 - Fäst en undersökningsetikett stående och en annan undersökningsetikett liggande under.




- Om en Keinorakko-etikett utskrivs, fäst den diagonalt överst.

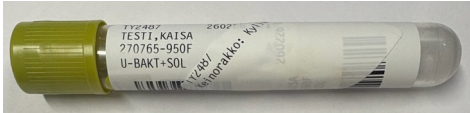

U-Tutk-Ped, 3 undersökningsetiketter

- Beige rör utan tillsatsämnen
 - Fäst en undersökningsetikett på röret.
- Olivgrönt rör med konserveringsmedel
 - Fäst en undersökningsetikett stående och en annan undersökningsetikett liggande under.
 - Om en Keinorakko-etikett utskrivs, fäst den diagonalt överst.
- Om provet bara räcker till ett rör, anteckna "1 putki" på undersökningsetiketten.

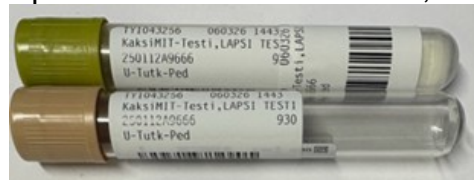


Obs. Alla grundundersökningar av urin: Om urinprovet bara räcker till ett rör, fäst alla undersökningsetiketter på röret.



E-Plas-O

- Undersökningsetiketten och anvisningsetiketten fästs på objektglasfodralet, inga etiketter på glaset.

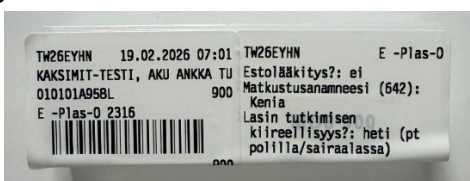

B-TbIFNg

- Anteckna inkubering på undersökningsetiketten ifall provet är inkuberat 16-24h i ett 37°C värmeskåp.



B-BaktVi

- Fäst en undersökningsetikett stående på båda flaskorna (anaerob och aerob)
- Om det tas en pediatrik flaska eller man bara får en flaska till provet fästs en undersökningsetikett stående på flaskan.
- Flaskornas egna streckkoder bör förbli synliga.




B-TbEVi, B-SienVi

- Fäst en undersökningsetikett stående.
- Flaskornas egna streckkoder bör förbli synliga.



MRSA-nenä, MRSA-nielu, MRSA-perin och MRSAVi

- Om provet har inkuberats i värmeskåp (+35 °C ± 2°C) över natten >12h:
 - Anmärka inkubering på undersökningsetiketten
 - Eller fyll i ett kryss på designerat plats på anvisningsetiketten och fäst etiketten på röret.

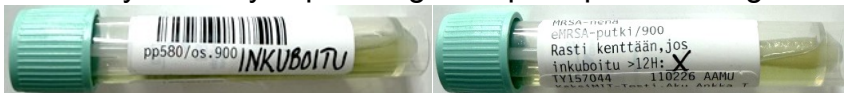

U-CtGcNhO, CtGcNhO

- Fäst undersökningsetiketten stående så, att de svarta fyllningslinjerna samt fönster till provet förblir synligt.

Uppdaterat: Arbetsgruppen för preanalytik 23.3.2026